

FICHE

Tests TROD antigéniques

Protocole d'organisation des Tests Rapides d'Orientation Diagnostique TROD antigénique du SARS-CoV2

Lieu de dépistage tests TROD antigéniques

- Cabinet médical ou infirmier ou pharmacie ou laboratoire de biologie médicale
- Si autre lieu après déclaration à l'ARS pour autorisation préfectorale (Salle municipale)

Organisation du lieu

- Salle d'attente et/ou salle d'accueil
- Salle de prélèvement avec un point d'eau
- Au moins deux professionnels (1 administratif + 1 préleveur)

Organisation des prélèvements

- Dans la zone d'accueil – salle d'attente
 - o Informer la personne à prélever sur ses droits : recueillir son consentement libre et éclairé,
 - o Vérifier les critères d'inclusion
 - o Remplir le formulaire d'enregistrement
 - o Attribuer un n° individuel
- Dans la zone de prélèvement
 - o Equipement de protection : masque FFP2, visière ou lunettes de protection, charlotte, gants, sur-blouse,
 - o Chronomètre ou minuteur
 - o Préparation et réalisation du test
 - o En vidéo : <https://www.globalpointofcare.abbott/fr/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html?wvideo=itnrrnrlp2>



UNION RÉGIONALE
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
CHIRURGIENS-DENTISTES
PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR



- Rendu des résultats
 - o Dans un espace confidentiel
 - o Par messagerie sécurisée dans l'attente de la transmission sur le site SI-DEP de l'assurance maladie, à l'adresse suivante pour la région PACA :
 - sm.PACAC@cnam-sm.mssante.fr
 - Par téléphone : 09 74 75 76 78 de 8h30 à 17h30 tous les jours (dimanche compris)
 - o Informations patients :
 - Nom et prénom
 - NIR – n° de sécurité sociale
 - Date de naissance
 - Date de prélèvement
 - Code postal du lieu de résidence
 - N° de téléphone portable

Règles d'hygiène et de sécurité

- EPI pour les professionnels
- Lavage des mains / gel hydro alcoolique
- Distance d'au moins 1 m entre chaque personne dans la salle d'attente
- Port du masque obligatoire
- Matériel de désinfection entre chaque patient
- Poubelle DASRI + poubelle « déchets ménagers »

Charte entre les professionnels :

Chaque professionnel s'engage à ne facturer que ses actes.

Pour mémoire :

Les boîtes de tests sont à vérifier suivant le mode d'emploi fourni à l'intérieur.

Les infirmiers ne sont pas autorisés à intervenir dans un barnum, un drive devant une officine, ni à l'intérieur de l'officine.

Lorsqu'un pharmacien et un autre professionnel habilité sont impliqués dans l'organisation des tests, les cotations prévues sont :

- Réalisation du test PCR seul
 - o IDEL : AMI 3.1 = 9.76
 - o Kiné : AMK 4.8 = 10.32
- Administratif + Rendu résultat patient + Envoi AM + DASRI
 - o Pharmacien : Code PMR TAG 2 = 16.20 HT

Les tests sont fournis gratuitement par les pharmaciens (facturation à l'assurance maladie) aux IDEL et aux médecins sur présentation de leur carte CPS/ORDRE + carte Vitale

Le nombre de tests, par jour et par professionnel :

- 1 boîte si le nombre de tests est = ou > 15
- 2 boîtes si le nombre de test est < 15

Les cotations pour la réalisation de l'intégralité de la démarche :

Administration + prélèvement nasopharyngé + traçabilité + envoi des résultats + DASRI

✚ Les Infirmières

A domicile : AMI 9.5

Au cabinet : AMI 8.3

Dépistage collectif : AMI 6.1

✚ Les médecins

Au cabinet : C2 +/- MIS si participation recherche cas contact

Au domicile : V2 +/- MIS si participation recherche cas contact

✚ Les pharmaciens

Dans l'officine : 26.00 €

Élimination des DASRI

Lors de l'organisation en binôme pharmacien/autre préleveur, l'élimination des DASRI est assurée par les pharmaciens. Dans les autres cas, c'est le professionnel exerçant qui assure.

Critères d'inclusion

Sous réserve de la parution officielle des textes

Tous les patients saufs :

- ✓ Cas contact
- ✓ Cluster
- ✓ Pré opératoire

Et pour Patient > 65 ans symptomatique : résultat négatif = RT-PCR pour confirmer → transmission du prélèvement au laboratoire d'analyses médicales.



**FICHE DE TRACABILITE DE LA REALISATION DU TEST RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE
ANTIGENIQUE DE L'INFECTION PAR SARS-CoV-2**

Cette fiche est à remettre au patient

La réalisation du TROD antigénique est à réserver aux patients symptomatiques d'une infection par SARS-CoV-2 (Covid 19) de 65 ans ou moins et sans facteur de risque. Le patient doit présenter des symptômes évocateurs de la Covid 19 depuis moins de 4 jours.

Les patients symptomatiques de plus de 65 ans et présentant des facteurs de risques doivent être ré orientés vers leur médecin traitant (ils pourront réaliser un test RT-PCR), les personnes contacts à risque doivent être orientées vers la réalisation d'une RT-PCR dans un laboratoire d'analyse médicale.

Les TROD à utiliser sont ceux inscrits sur la liste des dispositifs de tests antigéniques répondant aux critères de l'arrêté du 16 octobre 2020 publié sur le site du ministère : <https://covid-19.sante.gouv.fr/tests>

Infirmier.e ayant réalisé le TROD antigénique	
Nom :	
Prénom :	
Informations sur la réalisation du TROD	
Date et heure de réalisation du test	
Résultat du TROD	

Patient.e	
Nom :	
Prénom :	
Date de naissance :	

Si le résultat est négatif, vous devez impérativement : Continuer d'appliquer les gestes barrières ; Porter un masque ; Maintenir une distanciation sociale.

Si le résultat est positif, vous êtes un cas confirmé de Covid 19, vous devez :

- Vous isoler immédiatement ;
- Porter un masque chirurgical ;
- Limiter vos contacts au sein de votre foyer ;
- Contacter votre médecin traitant.

Vous serez contacté par les services de l'Assurance Maladie pour identifier les personnes avec lesquelles vous avez eu un contact à risque de contamination.


Date

Signature du professionnel ayant réalisé le test


Réalisation du test

Matériel disposé sur la table :

- L'écouvillon nasopharyngé stérile présent dans le kit.
- Les réactifs du TROD antigénique : un tube de solution tampon d'extraction, et un bouchon
- Un collecteur DASRI.
- Solution hydro-alcoolique.
- Des lingettes désinfectantes (virucide selon la norme 14476).

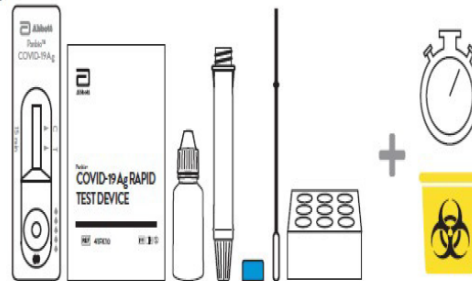

EFFECTUER LES ETAPES SUIVANTES :

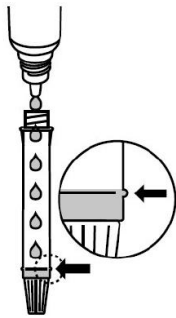


- Tenez le flacon tampon verticalement et remplissez le tube d'extraction avec du liquide tampon jusqu'à ce qu'il s'écoule jusqu'à la ligne de remplissage (300µl)


Attention:

Si la quantité de tampon est excessive ou insuffisante, un résultat de test incorrect peut se produire.

- Placez le tube d'extraction dans le support de tubes

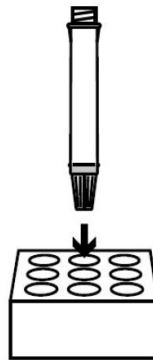

❖ Effectuer un prélèvement nasopharyngé par écouvillonnage

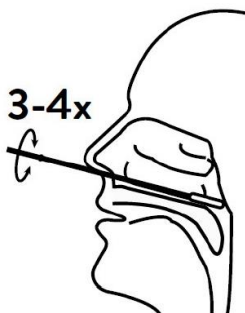



Chez un patient assis :

- Inclinez la tête du patient en arrière.
- Insérez l'écouvillon dans la narine.
- Frottez et roulez 3 à 4 fois.
- Laissez l'écouvillon en place pendant plusieurs secondes.
- Retirez lentement l'écouvillon.

❖ Inviter la personne à se diriger vers la zone d'attente

Procéder à l'étape suivante :

- Insérez l'écouvillon dans le tube d'extraction.
- Faites tourbillonner la pointe de l'écouvillon dans le fluide tampon à l'intérieur du tube d'extraction au moins cinq fois.
- Puis faites sortir l'écouvillon en pressant le tube d'extraction avec vos doigts

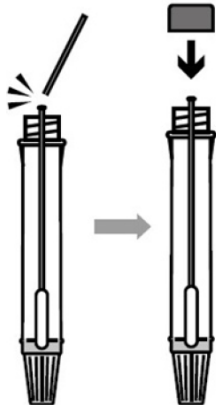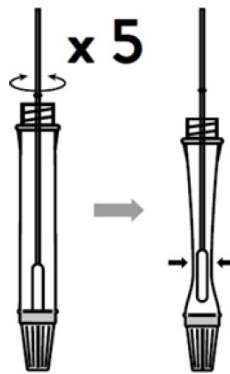


- Cassez l'écouvillon au point de rupture et fermez le capuchon du tube d'extraction

- ❖ **Etiqueter le tube avec le numéro de la personne.**
- ❖ **L'extérieur du tube bouché est désinfecté à l'aide d'une lingette désinfectante et ensuite acheminé vers une pailasse dédiée.**
- ❖ **Désinfecter la zone de prélèvement entre deux personnes.**

❖ Inscrire au feutre indélébile sur le dispositif de test, le numéro de la personne prélevée.

❖ Suivre les étapes ci-dessous :

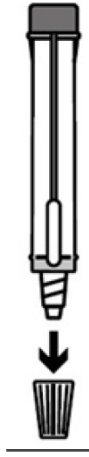

- Ouvrez le capuchon de la buse à goutte au bas du tube d'extraction


- Distribuez verticalement 5 gouttes d'échantillons extraits dans le puits d'échantillon (S) de l'appareil
- Ne pas manipuler ni déplacer le dispositif de test tant que le test n'est pas terminé et prêt pour la lecture


 **Attention:**

Les bulles qui se produisent dans le tube d'extraction peuvent conduire à des résultats inexacts.

- Si vous ne parvenez pas à créer suffisamment de gouttes, cela peut être dû à un colmatage de la buse de distribution.
- Secouez doucement le tube pour libérer le blocage jusqu'à ce que vous observiez la formation de gouttes libres.

5 x 

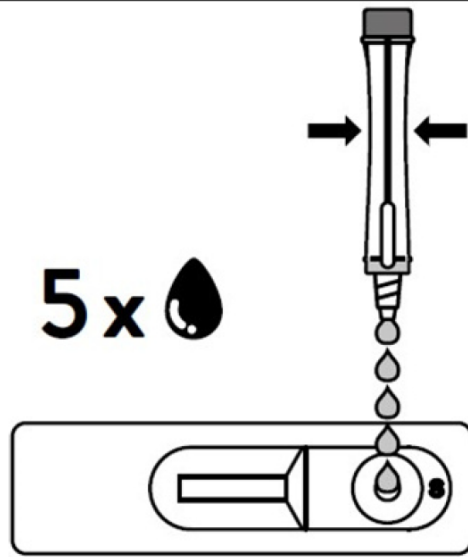

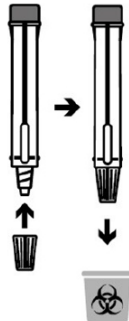

- Fermer la buse et jeter le tube d'extraction avec l'écouvillon usagé dans le container DASR conformément à vos réglementations locales et au protocole d'élimination des déchets à risque infectieux.

❖ Lancer le chronomètre pour une durée de 15 minutes

- Démarrer le minuteur.
- **LIRE LE RESULTAT A 15 MINUTES**

 **Attention:**


la lecture du test doit impérativement être faite entre 15 et 20 minutes et pas au-delà, au risque d'obtenir des résultats erronés.



LECTURE DU TEST


NEGATIF

La présence seule de la ligne de contrôle (C) et aucune ligne de test (T) dans la fenêtre de résultat indique un résultat négatif.

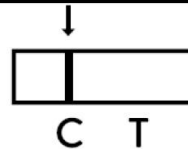


POSITIF

La présence de la ligne de test (T) et de la ligne de contrôle (C) dans la fenêtre de résultat, quelle que soit la ligne qui apparaît en premier, indique un résultat positif.

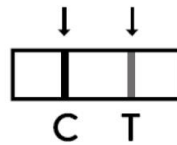

⚠ Attention: la présence d'une ligne de test (T), aussi faible soit-elle, indique un résultat positif.

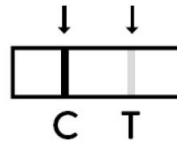

INVALIDE

Si la ligne de contrôle (C) n'est pas visible dans la fenêtre de résultat après l'exécution du test, le résultat est considéré comme invalide. Les instructions peuvent ne pas avoir été suivies correctement. Il est recommandé de relire la notice d'utilisation avant de tester à nouveau l'échantillon avec un nouveau dispositif de test.

